



Sujeción abdominal


Las bandas con cierre de seguridad CLIPBELT están indicadas especialmente para asegurar la sujeción de personas con facultades psíquicas alteradas y para aquellos casos en que se precisa la sujeción total o parcial del paciente para evitar caídas, arrancamiento de goteros, sondas, sin, al mismo tiempo, causar molestias ni daños al paciente, dando a éste alguna movilidad, etc. Son útiles en servicios de urgencias, cuidados intensivos, traumatología, ortopedia, ambulancias, geriatría, etc. Algunos tipos de cinturones y bandas se pueden utilizar en sillas de ruedas, sillones, etc.

La sujeción es a la vez segura y suave, no irritando las zonas de contacto con la piel al estar acolchado con rizo de algodón y permitiendo amplia libertad de movimientos, si bien es imposible que el propio paciente se libere a sí mismo, aunque puede ser abierto con sencillez por el personal sanitario.

SISTEMAS CLIPBELT



CLIPBELT MAGNÉTICO
Una llave magnética facilita el desbloqueo del cierre.

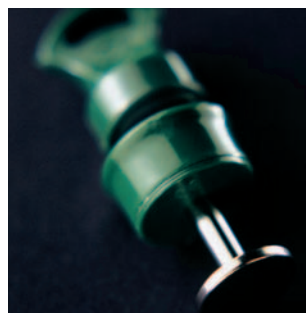

CLIPBELT DE BOLÍGRAFO
Un bolígrafo introducido en el orificio al efecto, facilita el desbloqueo del cierre.

MATERIALES Y ACABADOS



CLIPBELT de polipropileno

Cintas de polipropileno forradas con rizo de algodón en las zonas de contacto con el paciente y con acolchado interno. Acabado ancho y estrecho. Tamaños mediano y grande.



CLIPBELT de algodón

Cintas de algodón 100% natural sin tinte forradas con rizo de algodón en las zonas de contacto con el paciente y con acolchado interno. Los materiales empleados permiten su lavado y esterilización en autoclave. Acabado ancho y estrecho. Tamaños mediano y grande.



MODELOS

CLIPBELT presenta con sus dos acabados, sus dos sistemas de cierre, con sus versiones ancho y estrecho y con distintos tamaños, la gama mas amplia completa y versátil del mercado, en sus distintos modelos.

Modelos y tamaños

Dependiendo del tipo de sistema de apertura del cierre, las bandas con cierre de seguridad CLIPBELT pueden ser con apertura mediante bolígrafo o mediante llave magnética y dependiendo del material en que están fabricadas pueden ser de cinta de polipropileno o de cinta de algodón.

CLIPBELT sujeción abdominal a cama

Permiten mover piernas y brazos, sentarse y girarse lateralmente. Puede evitarse el giro lateral empleando una o las dos bandas de bloqueo.

Incluye 3 cierres y 2 llaves.

CLIPBELT sujeción muñecas a cinturón

Para usar este tipo de sujeción es necesario contar con un CLIPBELT de sujeción abdominal a cama ancho.

Dependiendo de su colocación puede proporcionar mayor o menor movilidad de las manos.

Incluye 2 cierres.

CLIPBELT sujeción una muñeca a cama

Este tipo de sujeción se coloca directamente al bastidor de la cama.

Incluye 2 cierres y 1 llave.

CLIPBELT sujeción piernas o tobillos a cama

Esta sujeción permite inmovilizar en mayor o menor medida las piernas o tobillos, dependiendo de la altura a que se coloque su banda principal, que se sujeta directamente al bastidor de la cama.

Incluye 4 cierres y 1 llave.

CLIPBELT sujeción hombros y tórax a cama

Para usar este tipo de sujeción es necesario contar con un CLIPBELT de sujeción abdominal a cama ancho.

Dispone de dos bandas de bloqueo de hombros que evitan, en los casos en que sea necesario, que el paciente se incorpore.

Incluye 2 cierres.

CLIPBELT sujeción a silla o sillón

Se trata de un cinturón abdominal preparado para su utilización en una silla o sillón, dotado de tirantes en los hombros para evitar que el paciente se venza hacia adelante.

Incluye 2 cierres y 1 llave.



Mediante la utilización de un CLIPBELT completo, que comprende los diferentes productos de la gama, se puede conseguir una inmovilización total del paciente acostado boca arriba.





CLIPBELT ALGODÓN BOLÍGRAFO

Referencias

- 102800012 CLIPBELT abdominal a cama. Estrecho mediano (75-100 cm).
- 102800013 CLIPBELT abdominal a cama. Estrecho grande (94-140 cm).
- 102800022 CLIPBELT abdominal a cama. Ancho mediano (75-100 cm).
- 102800023 CLIPBELT abdominal a cama. Ancho grande (94-140 cm).
- 102800035 CLIPBELT dos muñecas a cinturón ancho.
- 102800037 CLIPBELT una muñeca a cama.
- 102800040 CLIPBELT dos tobillos o piernas a cama.
- 102800056 CLIPBELT hombros y tórax a cama. Con bloqueo. Mediano.
- 102800066 CLIPBELT sujeción a silla o sillón. Mediano.



CLIPBELT POLIPROPILENO BOLÍGRAFO

- 102801012 CLIPBELT abdominal a cama. Estrecho mediano (75-100 cm).
- 102801013 CLIPBELT abdominal a cama. Estrecho grande (94-140 cm).
- 102801022 CLIPBELT abdominal a cama. Ancho mediano (75-100 cm).
- 102801023 CLIPBELT abdominal a cama. Ancho grande (94-140 cm).
- 102801035 CLIPBELT dos muñecas a cinturón ancho.
- 102801037 CLIPBELT una muñeca a cama.
- 102801040 CLIPBELT dos tobillos o piernas a cama.
- 102801056 CLIPBELT hombros y tórax a cama. Con bloqueo. Mediano.
- 102801066 CLIPBELT sujeción a silla o sillón. Mediano.



CLIPBELT ALGODÓN CON CIERRES MAGNÉTICOS

- 102810012 CLIPBELT magnético abdominal a cama. Algodón. Estrecho mediano (75-100 cm).
- 102810013 CLIPBELT magnético abdominal a cama. Algodón. Estrecho grande (94-140 cm).
- 102810022 CLIPBELT magnético abdominal a cama. Algodón. Ancho mediano (75-100 cm).
- 102810023 CLIPBELT magnético abdominal a cama. algodón. Ancho grande (94-140 cm).
- 102810027 CLIPBELT magnético abdominal a cama especial 135 cm. Algodón. Ancho mediano.
- 102810035 CLIPBELT magnético dos muñecas a cinturón ancho. Algodón.
- 102810037 CLIPBELT magnético una muñeca a cama. Algodón.
- 102810040 CLIPBELT magnético dos tobillos o piernas a cama. Algodón.
- 102810056 CLIPBELT magnético hombros y tórax a cama. Con bloqueo. Algodón. Mediano.
- 102810066 CLIPBELT magnético sujeción a silla o sillón. Algodón. Mediano.



CLIPBELT POLIPROPILENO CON CIERRES MAGNÉTICOS

- 102811012 CLIPBELT magnético abdominal a cama. Polipropileno. Estrecho mediano (75-100 cm).
- 102811013 CLIPBELT magnético abdominal a cama. Polipropileno. Estrecho grande (90-140 cm).
- 102811022 CLIPBELT magnético abdominal a cama. Polipropileno. Ancho mediano (75-100 cm).
- 102811023 CLIPBELT magnético abdominal a cama. Polipropileno. Ancho grande (90-140 cm).
- 102811035 CLIPBELT magnético dos muñecas a cinturón ancho. Polipropileno.
- 102811037 CLIPBELT magnético una muñeca a cama. Polipropileno.
- 102811040 CLIPBELT magnético dos tobillos o piernas a cama. Polipropileno.
- 102811056 CLIPBELT magnético hombros y tórax a cama. Con bloqueo. Polipropileno. Mediano.
- 102811066 CLIPBELT magnético sujeción a silla o sillón. Polipropileno. Mediano.



CLIPBELT POLIESTER

- 102812001 CLIPBELT abdom. poliester magnético. Mediano
- 102812002 CLIPBELT muñeca-cama poliester magnético

- 252820002 Cierre de seguridad CLIPBELT completo. Con bolígrafo llave.
- 252820003 Cierre de seguridad CLIPBELT magnético completo. Con llave.
- 252820005 Cierre de seguridad CLIPBELT magnético. Sin llave.
- 302880012 Llave magnética CLIPBELT.



CLIPBELT sujeción a silla o sillón

